

What is . . ?

Skin Master Plus è uno strumento rivoluzionario per il ringiovanimento della pelle. Skin Master Plus agisce sulla pelle delicatamente rimuovendo gli strati più superficiali della cute e rigenerando quelli più profondi rendendo il viso giovane e luminoso sin dal primo trattamento. Skin Master Plus rappresenta un sistema di cura del viso ed è la combinazione di 3 apparecchi con altrettanti differenti tecnologie:

- Onda elastica di natura piezoelettrica, per un'efficace peeling, idratazione e ginnastica della pelle.
- MLM (Microcurrents Low Modals) per ricostituire le molecole della giovinezza: collagene ed elastina.
- Laser, per un'azione selettiva sulla ruga che dura nel tempo.

Skin Master Plus si avvale di una linea di prodotti dermocosmetici studiati per prolungarne gli effetti rigenerando il fabbisogno vitale della pelle, contrastandone le carenze fisiologiche ed estetiche.

Skin Master Plus is a revolutionary instrument for the rejuvenation of the skin. Skin Master Plus acts delicately on the skin removing the superficial layer and regenerating the deeper layers making the face youthful and luminous from the first treatment. Skin Master Plus represents a system of face care and is a combination of 3 devices with as many different technologies:

- Elastic wave of piezoelectric nature, for efficacious peeling, hydration and skin gymnastics.
- MLM (Modulating Low Microcurrents) to reconstruct the youth molecules: collagen and elastin.
- Laser, for a selective action on the wrinkles that lasts in time.

Skin Master Plus uses a line of derma cosmetic products studied in order to prolong the effects, regenerating the vital requirements of the skin, contrasting physiological and aesthetic lacks.

Peeling


Funzione utilizzata per ottenere una decisa esfoliazione dello strato corneo dell'epidermide. Skin Master Plus è in grado di garantire una pulizia profonda con l'eliminazione delle cellule morte, del sebo in eccesso, del fucico residuo e di altre sostanze tossiche. Inoltre, il fenomeno di cavitazione, generato dall'Onda Elastica, distrugge i germi presenti, correlabili ad alcune patologie (es. Acne). La parte trattata va sempre inrolata con acqua naturale o con una specifica soluzione (Peeling solution), per un migliore adattamento cuticolostrale. Le onde elastiche, prodotte dall'attizzatore, disgregano le cellule di sfaldamento inglobandole nella soluzione peeling e attraverso la vaporizzazione, ne favoriscono la rimozione. La pelle risulta immediatamente liscia con pori e follicoli piliferi liberi.

This function is used to obtain an exfoliation of the corneus layer of the epidermis. Skin Master Plus is able to guarantee a deep clearing with the removal of dead cells, excess sebum, residual make up and other toxic substances. Furthermore, the cavitation phenomenon, generated by the Elastic Wave, destroys the germs present, jointly responsible for some pathologies (e.g. acne). The part to be treated is always clamped with natural water or with a specific solution (Peeling solution), for a better adaptation skin structure. The elastic waves produced by the actuator, disaggregate the flaking cells enclosing them in the peeling solution then remove them through vaporisation. The skin is immediately smooth with clean pores and piliferous follicles.

Disidratazione, perdita di compattezza ed elasticità della pelle rappresentano le principali minacce per la salute e la bellezza della cute. Skin Master Plus, consente una perfetta idratazione: dopo il trattamento peeling, le vie d'accesso della pelle risultano libere e reattive ed è facile introdurre, attraverso essa, soluzioni specifiche a acqua naturale, producendo una perfetta e salutare idratazione estogena.

Dehydration, loss of compactness and elasticity of the skin, represent the principal threats to the health and beauty of the skin. Skin Master Plus performs a perfect hydration after the peeling treatment, the access to the skin is freed and receptive and it is easy to introduce specific solutions of natural water into it, producing healthy exogenous hydration.

Moisturising

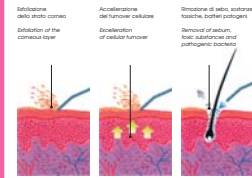

Regeneration

La senescenza precoce, dovuta a fattori esterni ed ad un generale rallentamento delle attività di sintesi, può essere efficacemente contrastata grazie all'erogazione delle correnti MLM (potente attivatore del metabolismo locale) dello Skin Master Plus. I particolari elettrodi, circolare e selettivo, stimolano il metabolismo delle aree trattate svolgendo un'efficace azione di ringiovanimento e di prevenzione contro le rughe.

Efficace nel riequilibrare il metabolismo locale soprattutto sulla pelle senescente, dove i processi di rinnovamento cellulare risultano rallentati per lo scarso apporto di sostanze nutritive e per l'esiguo irrorazione ematica. Questo trattamento produce un'efficace iperemia, dovuta alla compressione - decompressione delle strutture sottoposte al microscambio dell'Onda Elastica.


Efficacious in rebalancing the local metabolism above all on senescent skin, where the processes of cellular renewal are slowed down because of the scarce production of nutritive substances and for the scanty of haematic supply. The treatment produces an efficacious hyperemia, due to the compression and decompression of the structures subject to the Elastic Wave microcirculation.

Circulation




Precoce senescenza, dovuta a fattori esterni ed ad un generale slowing down of synthesis activity, can be efficiently contrasted thanks to the supply of MLM currents (a powerful activator of local metabolism) of the Skin Master Plus. The particular circular and selective electrodes stimulate the metabolism of the treated areas carrying out an efficacious action of rejuvenation and of wrinkle prevention.

MLM Modulating Low Microcurrents. Treatment current: 4000 Hz. Treatment modulus: 100 Hz. MLM Modulating Low Microcurrents. Beating frequency: 4000 Hz modulating frequency: 100 Hz.

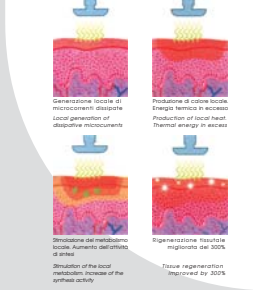

Deep Wrinkles

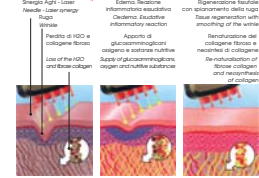

Quando più aumenta l'età, tanto più diminuiscono collagene, elastina e glicosaminoglicani che, potendo essere notevoli quantità di acqua, mantengono la pelle giovane e tesa. Skin Master Plus, con l'emissione MLM - laser (maripoligoni), stimola al livello del derma lo fase infiammatoria esudativa (edema), che richiama la proliferazione dei fibroblasti, i quali sintetizzano il collagene e l'elastina. Grazie a questo meccanismo, il collagene non viene più introdotto dall'esterno, ma prodotto dal corpo stesso. In poche sedute la pelle ricopre la resistenza e l'elasticità, scompaiono gran parte delle rughe e i segni dell'invecchiamento: il volto sembra rimodellato e riconquista tutto il suo splendore.

The more age advances the more collagen, elastin and glycosaminoglycans are diminished, which being able to retain large quantities of water, keep the skin youthful and taut. The Skin Master Plus, with the emission of MLM - laser (parapolygons), stimulates the inflammatory exudative (oedema) of the derma level, which recalls the proliferation of the fibroblasts that synthesise the collagen and elastin. Thanks to this mechanism the collagen is not introduced from the outside but produced by the body itself. In a few sittings the skin recovers resistance and elasticity, a large part of wrinkles and the signs of ageing disappear. The face seems remodelled and recaptures all its splendour.



Beauty Results

Ringiovanimento
Sparimento delle rughe
Elasticità cutanea
Idratazione della pelle
Contenimento del problema acne
Eliminazione degli estri cicatriziali
Pelle luminosa e idratata

Rejuvenation
Smoothing of wrinkles
Cutaneous elasticity
Hydration of the skin
Reduction of acne problems
Elimination of scarring
Luminous and hydrated skin

Alimentazione	110 - 220 V - (L-07N) - 50/60 Hz
Consumo	110 VA
Classe di sicurezza secondo IEC 60335-1	Classe I tipo BF
Leggibilità	45 x 34 x 126 cm.
Peso	9 Kg
Pulsile	12A 5 x 20 mm
Attivatore	
Circolazione micro (Peeling 100%)	100 micro amp. ± 20%
Frequenza	20000 Hz ± 10%
Laser	
Emissione laser interno	3,5 mW
Emissione laser accendibile	< 1 mW
Lunghezza d'onda	660 ± 10 nm
Durata dell'emissione	Continua
Classe del dispositivo laser secondo IEC 60335-1	Classe I
Corrente MLM	
Modulo corrente in uscita	8 mA @ (0,1 + 10) G ohm
Forma d'onda in uscita	Spulsiva a 4000 Hz modulata in complesso da Quadrifonia Offset a 100 Hz
Timer	Vibrazione da display
Opzioni	Controllo

Alimentazione	110 - 220 V - (L-07N) - 50/60 Hz
Consumo	110 VA
Classe di sicurezza secondo IEC 60335-1	Classe I tipo BF
Leggibilità	45 x 34 x 126 cm.
Peso	9 Kg
Pulsile	12A 5 x 20 mm
Attivatore	
Circolazione micro (Peeling 100%)	100 micro amp. ± 20%
Frequenza	20000 Hz ± 10%
Laser	
Emissione laser Emision	3,5 mW
Accendibile laser	< 1 mW
Wave length	660 ± 10 nm
Duration of emission	Continua
Laser device class according to IEC 60335-1	Class I
MLM Currents	
Maximum output current	8 mA Constant current
Output frequency	4000 Hz
Timer	Vibrated by display
Options	Timer

Per informazioni o per ricevere maggiori informazioni visitate il nostro sito web:
Per contacts and further information please visit:
www.2renewmed.com

Oppure scrivete a:
Via dell'Industria 12
10138 Genova
info@2renewmed.com



SKIN
DUAL ACTION SYSTEM